
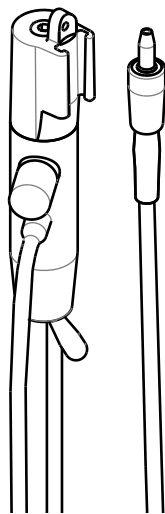



article 0473 SIRONA C245+ docking

overview / aperçu / Übersicht / overzicht

[A]

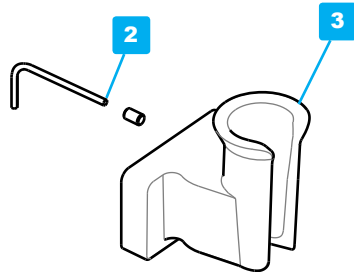

[B] - [C]

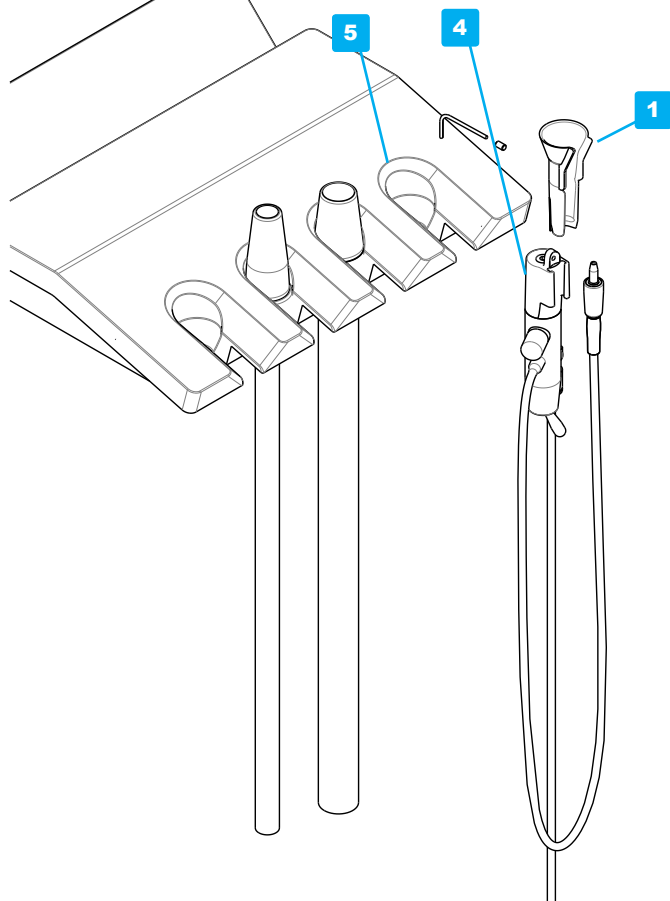

EN

Please read all user instructions of mirrors and handles before use.
This docking is to be used exclusively with the Yirro-plus® self cleaning dental mirror system

This package contains the following items:

- * 1 SIRONA C245+ adapter[1] for integrated mounting
- * 1 Allen key 1,5 mm
- * 1 user instruction

Instruction for mounting of SIRONA C245+ docking on delivery unit

[A] Remove the setscrew [2] with the furnished Allen key and remove the universal docking [3]

[B] Slide the SIRONA C245+ adapter [1] over the air regulator [4] and place the setscrew [2] by use of the Allen key.

[C] Place the assembly of docking and air regulator in the suitable slot of the SIRONA assistant unit [5]. (The position of the slot may vary for each assistance unit, depending from the type C2+, C4+, C5+ See other side for example pictures.)

F

Veuillez lire tout les instructions d'utilisation des miroirs et manches.
Utilisez ce 'docking' exclusivement en combinaison avec le système miroir dentaire auto-nettoyant Yirro-plus®

Ce paquet contient les éléments suivante:

- * 1 'Le SIRONA C245+ docking' [1] pour montage intégré
- * 1 Clé hexagonale
- * 1 mode d'emploi

L'instruction pour montage du 'SIRONA C245+ docking' à l'unité d'assistance

[A] Retirez la vis de réglage [2] avec la Clé hexagonale fournie et retirez le 'docking' universel [3]

[B] Faites glisser le 'SIRONA C245+ docking' [1] sur le régulateur d'air [4] et placez la vis de fixation [2] avec la Clé hexagonale.

[C] Placez l'assemblage du 'SIRONA C245+ docking' et régulateur d'air dans une fente libre de l'unité d'assistance de SIRONA [5]. (La position de la fente peut varier pour chaque unité d'assistance, selon le type C2 +, C4 +, C5 + Voir l'autre côté pour les exemples.)

D

Bitte lesen Sie die Benutzer-Instruktionen von Spiegeln und Handgriffen
Diese Halterung dürfen Sie nur anwenden beim Mundspiegel System Yirro-plus

Dieses Paket enthält die folgenden Komponenten:

- * 1 'SIRONA C245+ Halterung' [1] zur integrierte montage
- * 1 Inbusschlüssel 1,5 mm
- * 1 Benutzer-Anleitung

Anleitung zur Montage des 'SIRONA C245+ Halterungs' an der SIRONA Assistenz-Einheit

[A] Entfernen Sie die Stellschraube [2] mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und entfernen Sie das die Universalhalterung [3].

[B] Schieben Sie den SIRONA C245+ SLOT Halterung [1] über den Luftregler [4] und montieren Sie die Fixationsschraube [2] wieder mit dem Inbusschlüssel.

[C] Jetzt stellen Sie die Assemblage von Halterung und Luftregler in einen freien Steckplatz der SIRONA-Assistenteneinheit. [5]

Lees vooraf de instructies voor het gebruik van spiegels en handgrepen
Deze docking is alleen bedoeld voor gebruik bij het Yirro-plus®
mondspiegelsysteem

Deze verpakking bevat de volgende componenten:

- * 1 SIRONA C245+ docking [1] voor geïntegreerde montage
- * 1 inbussleutel 1,5 mm
- * 1 instructie

Instructie voor montage van de SIRONA C245+ docking op uw assistentie unit

[A] Verwijder de stelschroef [2] met de meegeleverde inbussleutel en verwijder de universele docking [3]

[B] Schuif de SIRONA C245+ docking [1] over de luchtregelaar [4] en plaats de stelschroef [2] terug met de inbussleutel.

[C] Plaats het geheel van docking- en luchtregelaar op een vrije plaats in uw SIRONA assistentie-unit [5]. (De positie kan variëren per type SIRONA assistentie unit voor C2+, C4+, C5+. Zie hiernaast voor voorbeelden.)



SIRONA C4+ /C5+

For C2 there are 2 options.
The standard docking adapter
(included in Start set)
fits in the 4th slot.



SIRONA C2+

Yirro-plus® is a registered trademark of DHM-dental B.V., the Netherlands

first class performance



DHM-dental B.V.
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem, Nederland
www.dhm-dental.com

