
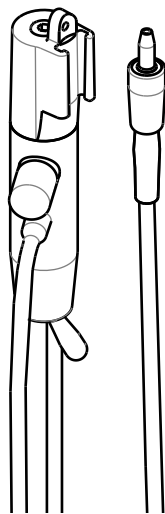



## article 0720 SIRONA INTEGO docking

### overview / aperçu / Übersicht / overzicht

[A]

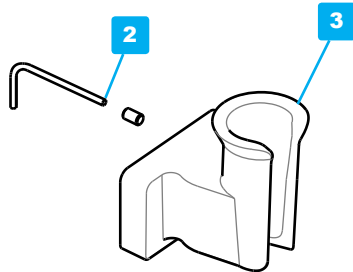

[B] - [C]

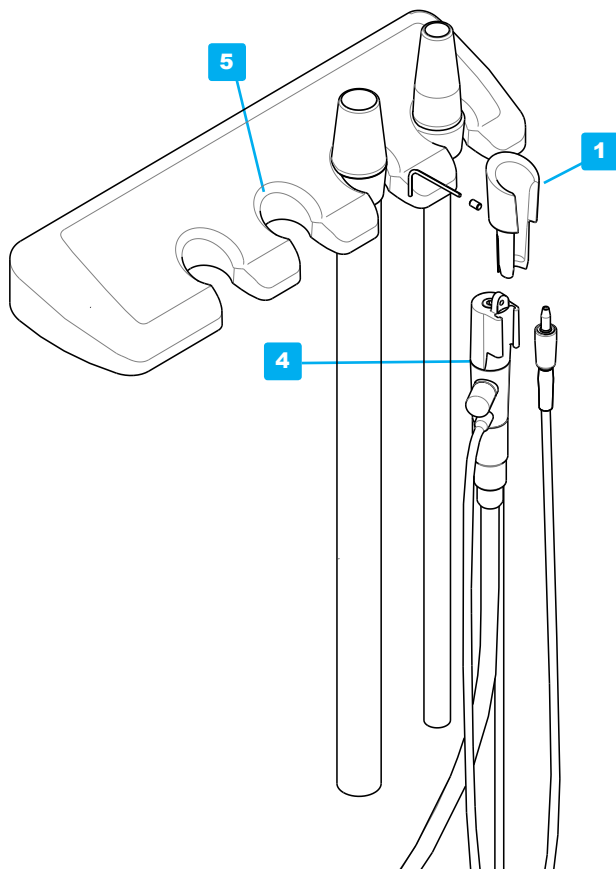

**EN**

Please read all user instructions of mirrors and handles before use.  
This docking is to be used exclusively with the Yirro-plus® self cleaning dental mirror system

This package contains the following items:

- \* 1 SIRONA INTEGO docking [1] for integrated mounting
- \* 1 Allen key 1,5 mm
- \* 1 user instruction

#### Instruction for mounting of SIRONA INTEGO docking on delivery unit

[A] Remove the setscrew [2] with the furnished Allen key and remove the universal docking [3]

[B] Slide the SIRONA INTEGO docking [1] over the air regulator [4] and place the setscrew [2] by use of the Allen key.

[C] Place the assembly of docking and air regulator in the suitable slot of the SIRONA Intego assistant unit [5].

**F**

Veuillez lire tout les instructions d'utilisation des miroirs et manches.  
Utilisez ce 'docking' exclusivement en combinaison avec le système miroir dentaire auto-nettoyant Yirro-plus®

Ce paquet contient les éléments suivante:

- \* 1 'Le SIRONA C245+ docking' [1] pour montage intégré
- \* 1 Clé hexagonale
- \* 1 mode d'emploi

#### L'instruction pour montage du 'SIRONA INTEGO docking' à l'unité d'assistance

[A] Retirez la vis de réglage [2] avec la Clé hexagonale fournie et retirez le 'docking' universel [3]

[B] Faites glisser le 'SIRONA INTEGO docking' [1] sur le régulateur d'air [4] et placez la vis de fixation [2] avec la Clé hexagonale.

[C] Placez l'assemblage du 'SIRONA INTEGO docking' et régulateur d'air dans une fente libre de l'unité d'assistance de SIRONA Intego [5].

**D**

Bitte lesen Sie die Benutzer-Instruktionen von Spiegeln und Handgriffen  
Diese Halterung dürfen Sie nur anwenden beim Mundspiegel System Yirro-plus

Dieses Paket enthält die folgenden Komponenten:

- \* 1 'SIRONA INTEGO Halterung' [1] zur integrierte montage
- \* 1 Inbusschlüssel 1,5 mm
- \* 1 Benutzer-Anleitung

#### Anleitung zur Montage des 'SIRONA INTEGO Halterungs' an der SIRONA Assistenz-Einheit

[A] Entfernen Sie die Stellschraube [2] mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und entfernen Sie das die Universalhalterung [3].

[B] Schieben Sie den SIRONA INTEGO Halterung [1] über den Luftregler [4] und montieren Sie die Fixationsschraube [2] wieder mit dem Inbusschlüssel.

[C] Jetzt stellen Sie die Assemblage von Halterung und Luftregler in einen freien Steckplatz der SIRONA-INTEGO Assistenzeneinheit. [5]

**NL**

**Lees vooraf de instructies voor het gebruik van spiegels en handgrepen**  
**Deze docking is alleen bedoeld voor gebruik bij het Yirro-plus®**  
**mondspiegelsysteem**

Deze verpakking bevat de volgende componenten:

- \* 1 SIRONA INTEGO docking [1] voor geïntegreerde montage
- \* 1 inbussleutel 1,5 mm
- \* 1 instructie

#### **Instructie voor montage van de SIRONA INTEGO docking op uw assistentie unit**

**[A]** Verwijder de stelschroef [2] met de meegeleverde inbussleutel en verwijder de universele docking [3]

**[B]** Schuif de SIRONA INTEGO docking [1] over de luchtregelaar [4] en plaats de stelschroef [2] terug met de inbussleutel.

**[C]** Plaats het geheel van docking- en luchtregelaar op een vrije plaats in uw SIRONA Intego assistent-unit [5].

Yirro-plus® is a registered trademark of DHM-dental B.V., the Netherlands

first class performance



DHM-dental B.V.  
Simon Stevinweg 48  
6827 BT Arnhem, Nederland  
[www.dhm-dental.com](http://www.dhm-dental.com)

