
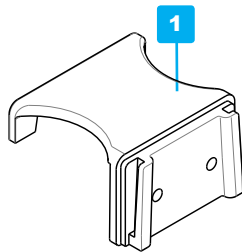



article 0750 XO-1 docking holder

overview / aperçu / Übersicht / overzicht

[B]

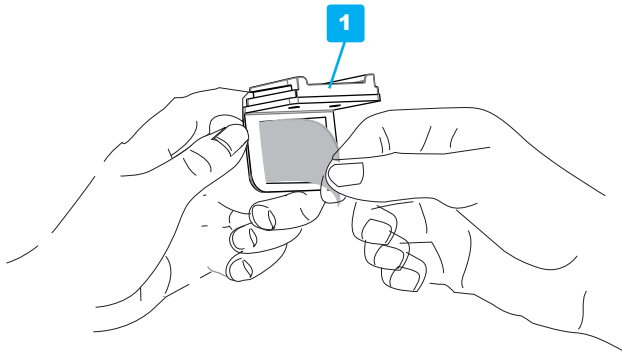

[C]

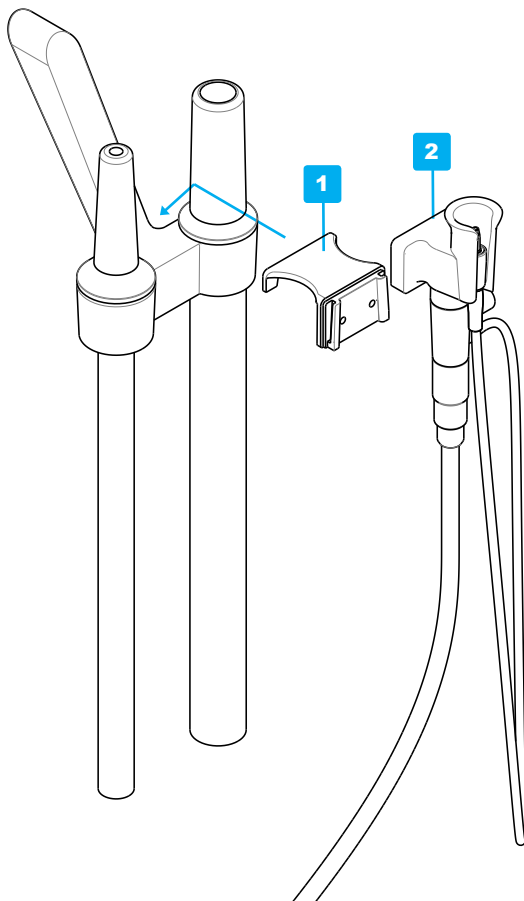

EN

Please read all user instructions of mirrors and handles before use
This docking holder is to be used exclusively with the Yirro-plus® self cleaning dental mirror system

This package contains the following components:

- * 1 XO-1 docking holder [1] for vertical mounting
- * 2 optional screws
- * 1 user instruction

Instruction for mounting of XO-1 docking holder on delivery unit

[A] Choose location on delivery unit

Choose a suitable location on your delivery unit: verify if the location is in good reach and free from other instruments. Verify if the 2,5m connection hose can reach an air-point. Clean the mounting surface thoroughly by use of disinfectant.

[B] Mounting of XO-1 docking holder

Remove tape cover and position the XO-1 docking holder on desired location. Press firmly for 20 seconds. If preferred you can use the co-supplied screws.

[C] Mounting of docking/regulation unit in XO-1 docking holder

Slide the universal docking [2] with the air regulator unit into the XO-1 docking holder [1].

F

Veuillez lire tout les instructions d'utilisation des miroirs et manches.
Utilisez ce 'XO-1 docking porteur' exclusivement au système miroir dentaire auto-nettoyant Yirro-plus®

Ce paquet contient les éléments suivante:

- * 1 'Le XO-1 docking porteur' [1] pour montage vertical
- * deux vis optionels
- * 1 mode d'emploi

Instruction pour le montage du 'XO-1 docking porteur'

[A] l'Emplacement sur l'unité d'assistance

Choisissez un bon emplacement sur votre unité d'assistance: vérifiez que l'emplacement est bien accessible et exempt d'autres instruments. Vérifiez que le tuyau de raccordement de 2,5 m peut atteindre le point pneumatique. Nettoyez soigneusement la surface en utilisant un désinfectant.

[B] Montage du 'XO-1 docking porteur'

Retirez le cache de la bande adhésive et placez le 'XO-1 + docking porteur' à l'emplacement souhaité. Appuyez fermement pendant 20 secondes. Si vous préférez, vous pouvez utiliser les vis fournies.

[C] Montage de 'Docking universel' dans le 'XO-1 docking porteur'

Insérez le 'docking universel' [2] dans le 'XO-1 docking porteur' [1].



Bitte lesen Sie alle Benutzer-Instruktionen von Spiegeln und Handgriffen. Diese XO-1 Halterungsträger dürfen Sie nur anwenden beim Mundspiegel System Yirro-plus®

Dieses Paket enthält die folgenden Komponenten:

- * 1 XO-1 Halterungsträger [1] zur Vertikalmontage
- * 2 optionelle Schrauben
- * 1 Benutzer-Anleitung

Montage des XO-1 Halterungsträgers an der Assistenzeinheit

[A] Richtige Lokation wählen

Wählen Sie eine passende Stelle auf Ihrer Assistenzeinheit: überprüfen Sie, dass diese Stelle gut erreichbar und frei von anderen Instrumenten ist. Überprüfen Sie, ob der 2,5 m lange Verbindungsschlauch einen Luftpunkt erreichen kann. Reinigen Sie die Montage-Oberfläche gründlich mit einem Desinfektionsmittel.

[B] Montage des XO-1 Halterungsträgers

Entfernen Sie die Klebebandabdeckung und positionieren Sie den XO-1 Halterungsträger an gewünschter Stelle. 20 Sekunden festdrücken. Bei Bedarf verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.

[C] Montage der Universalhalterung

Schieben Sie die Universalhalterung [2] über den XO-1 Halterungsträger [1].



Lees vooraf de instructies voor het gebruik van spiegels en handgrepen deze XO-1 dockinghouder is alleen bedoeld voor gebruik bij het Yirro-plus® mondspiegelsysteem

Deze verpakking bevat de volgende componenten:

- * 1 XO-1 dockinghouder [1] voor verticale montage
- * 2 optionele schroeven
- * 1 instructie

Instructie voor montage van de XO-1 dockinghouder

[A] Keuze van lokatie montagevlak op assistentie unit

Kies een passende locatie op uw assistentie unit: controleer of deze locatie goed bereikbaar is en vrij van andere instrumenten. Controleer of de 2,5 m verbindingsslang een luchtpunt kan bereiken. Reinig het oppervlak grondig met een desinfectiemiddel.

[B] Monteren van XO-1 dockinghouder

Verwijder de folie van de tape en plaats de XO-1 dockinghouder op de gewenste locatie. Druk 20 seconden stevig aan. Indien gewenst gebruikt u de meegeleverde schroeven.

[C] Montage van universele docking in XO-1 dockinghouder

Schuif de universele docking [2] met de luchtregelaar op de XO-1 dockinghouder [1].

Yirro-plus® is a registered trademark of DHM-dental B.V., the Netherlands

first class performance



DHM-dental B.V.
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem, Nederland
www.dhm-dental.com

